


ステージリンクP Cエミュレーション提案書

P C環境をエミュレートするソフトウェアにより基本ソフト（トロンOS）を含むステージリンクソフトがウィンドウズOS上で動作可能です。これによりステージリンク専用制御コンピュータとモニタ等が不要になり設置スペースが省けウィンドウズP Cのキーボードやマウスからステージリンクが操作できます。

1．システム構成

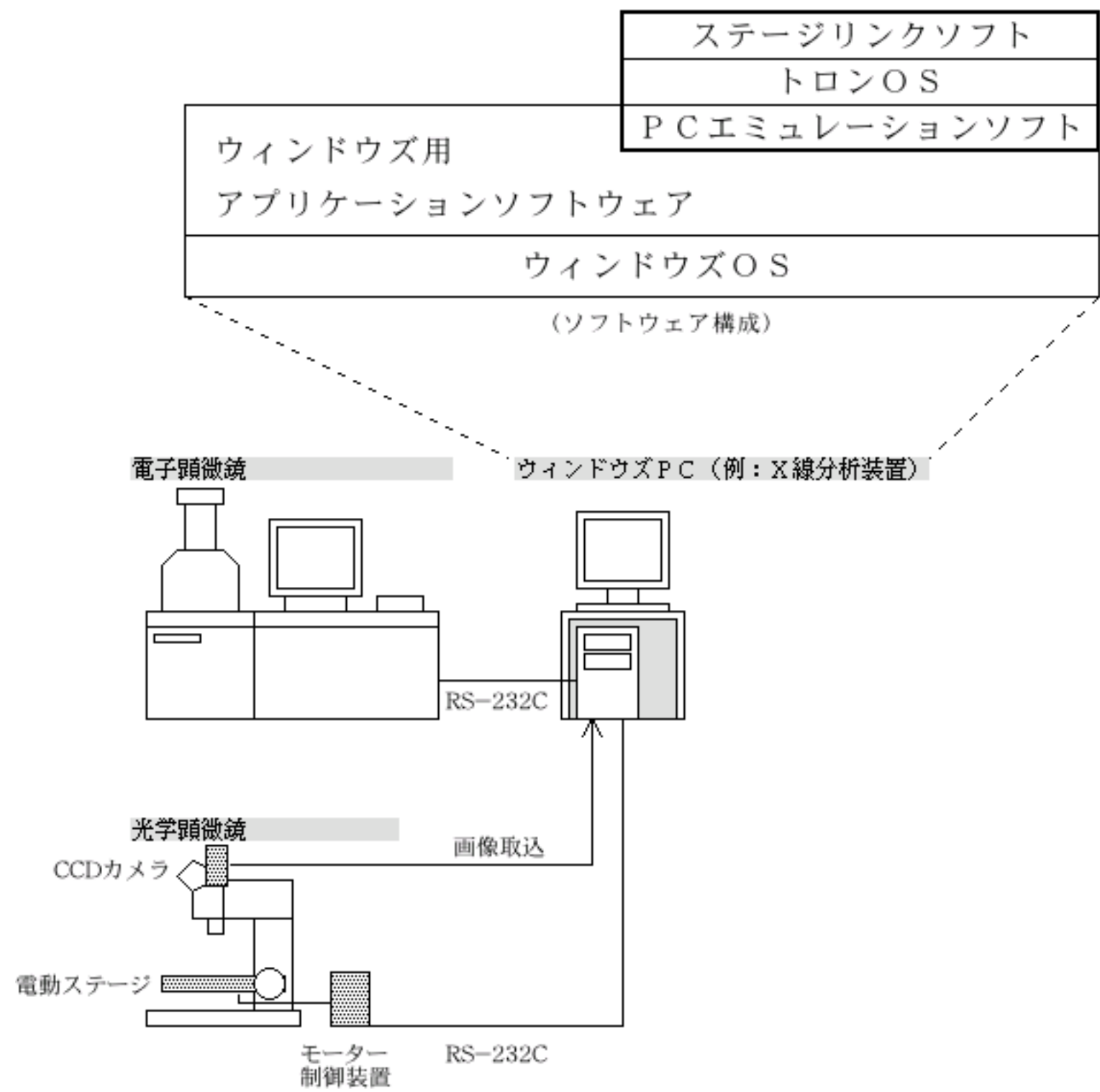

2．主な構成

2 - 1．ウィンドウズP C（例：X線分析装置）

- ・ウィンドウズP Cには、P Cエミュレーションソフト，基本ソフト（トロン），ステージリンクソフトウェアを導入します。
- ・電動ステージはR S - 2 3 2 Cを介してX軸とY軸を制御します。
- ・C C Dカメラの映像を取り込むビデオキャプチャアダプタを装着します。
- （ステージリンクの詳細は、[ステージリンク 2 基本構成と主な仕様](#)をご覧ください。）

2 - 2．電子顕微鏡

- ・電動ステージはR S - 2 3 2 Cを介してX軸とY軸を制御します。（通信制御オプションが必要になります。）

2 - 3．光学顕微鏡

- ・顕微鏡は、落射専用の明暗視野観察タイプ（例：オリンパス社製「B X 5 1 M」）を使用します。
- ・顕微鏡に電動ステージとC C Dカメラを装備します。
- ・電動ステージはR S - 2 3 2 Cを介してX軸とY軸を制御します。

3．主な機能

- ・静止画像取り込み（ビデオキャプチャ）機能
- ・座標データおよびステージマップの表示
- ・座標データの回転（R軸対応）機能
- ・ステージとの位置合わせ（アライメント）機能
- ・座標データおよびステージマップで目標位置を指定してステージ移動
- ・ステージ座標の登録と再現、登録済み静止画像の表示
- ・座標データや画像データは、ウィンドウズOSとのやり取りが可能

4．制限事項

- ・P Cエミュレーションソフトの動作中は、ステージリンクソフトが利用するR S - 2 3 2 Cポートは独占状態になります。

D K L ・ プログラマブルステージ制御装置「ステージリンク 2 」(型式:SL-D2/R2)

基本構成

- ステージリンク 2
 - ステージリンク 2 取扱説明書
 - ステージリンク 2 実行プログラム
 - ステージリンク 2 自動処理開発キット
 - ステージリンク 2 専用制御コンピューター式(TRON-OS採用)(3)
 - R S - 2 3 2 C 規格通信ケーブル
 - 各種顕微鏡制御プログラム

- 顕微鏡
 - 外部から制御できる電動ステージ装置付きの各種顕微鏡

主な仕様

- 制御軸数
 - 2 軸 (X , Y)
- 座標単位
 - 小数点 3 位までの μ m 単位(2)
- 位置出し補正機能
 - 特徴点による位置決め (最大 9 点、オフセット機能付き)
 - ソフトバックラッシュ除去
- 座標登録数
 - 最大 8 0 0 0 件 / 座標ファイル
- 座標情報
 - 分類 座標を分類できる 0 ~ 9 9 までの値 (カラー対応付けが可能)
 - 座標名 座標の名前で最大 1 2 文字までの文字列
 - X Y 位置 登録位置を示すシステムで統一された座標値
 - 固有情報 ユーザーが自由に設定できる最大 2 5 5 文字までの文字列
 - 図形リンク 座標に関連付けした図形ファイルへのリンク
- 座標ファイル形式
 - T A D 形式(4) (タブ区切りテキスト変換が可能)
- 図形登録数
 - 最大 1 2 6 0 件 / 座標ファイル
- 図形情報
 - 図形名 図形の名前で最大 2 0 文字までの文字列
 - X Y 位置 登録位置を示すシステムで統一された座標値
 - 視野情報 顕微鏡の視野倍率と寸法
 - 画像 4 ・ 8 ・ 16 ・ 24 ビット R G B 形式(最大 4000 × 4000 ドット)
 - 修飾 直線・矩形・円形・矢印などと文字列
- 図形ファイル形式
 - T A D 形式(4) (画像は、B M P ・ J P E G ・ P N G 変換が可能)
- 異物座標ファイル取込 I / F
 - U S B 接続フロッピーディスクまたはカードリーダーより取込。(1)
 - 取込可能ファイル形式は、K R F ・ H I F ・ S D F。
- 画像ファイル取込 I / F
 - U S B 接続カードリーダーまたはデジタルカメラより取込。
 - 取込可能ファイル形式は、B M P ・ J P E G ・ P N G。
- C C D 画像取込 I / F
 - N T S C 信号仕様に対応した C C D カメラ等。ビデオまたは S ビデオ端子接続。(1)
 - 取込サイズは、Q V G A ・ V G A、カラーは、1 6 ・ 2 4 ビット R G B 形式。
- 顕微鏡制御 I / F
 - R S - 2 3 2 C (コネクタ形状 9 ピン) × 1 ポート または、2 ポート(1)
 - 対応顕微鏡 電子顕微鏡 F B - 2 0 0 0 系 , S - 4 0 0 0 系
 - 光学顕微鏡 M D - 1 0 , M S S 2 系 , L S T E P
- 制御装置寸法
 - 幅 : 2 9 5 mm / 奥行き : 2 7 3 mm / 高さ : 6 3 . 5 mm
 - (部品調達の関係上、カラーデザインやサイズが変わる場合もございます。)

- 1 ・ オプションです。必要に応じてお求めください。
- 2 ・ 座標単位は、位置出しの精度を示すものではありません。実際の精度は、お使いになるステージ装置に依存します。
- 3 ・ T R O N は ” T h e R e a l - t i m e O p e r a t i n g s y s t e m N u c l e u s ” の略称です。
- 4 ・ T A D は、 ” T R O N A p p l i c a t i o n D a t a b u s ” の略称で、その仕様が公開されているデータ交換規約です。

このカタログは、2 0 0 4 年 7 月 2 9 日に作成されたものです。
出荷元 : (株) 電子光学研究所 作成 : 松田 智樹 (システム設計部)
〒 1 9 4 - 0 0 0 3 東京都町田市小川 2 - 2 5 - 1 3 T E L : 0 4 2 - 7 8 8 - 4 4 5 1 U R L : <http://www.dkl.co.jp/product/SL-D2/>